



Alfa Cure⁺

by  Solio



הוראות שימוש 

تعليمات الاستخدام 

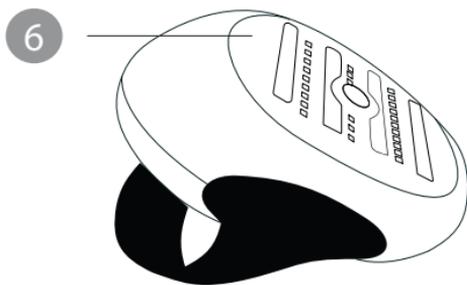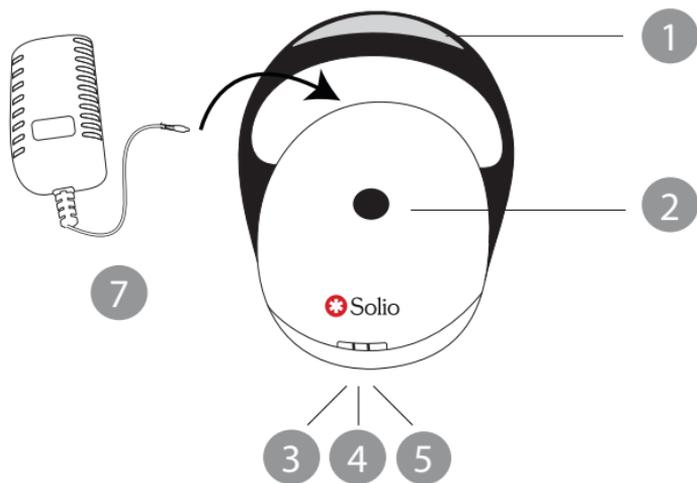

זכויות יוצרים © 2019 DMT בע"מ.

כל הזכויות שמורות.

זכויות יוצרים

חברת DMT בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים במוצריה או במפרט הטכני שלהם במטרה לשפר את הביצועים, האמינות או יכולת הייצור. המידע שמספקת DMT בע"מ ייחשב כמדויק ואמין בעת פרסומו. עם זאת, DMT בע"מ אינה נושאת באחריות על אופן השימוש בו. המידע אינו מעניק למשתמש, במשתמע או בכל אופן אחר, רישיון במסגרת פטנט או זכויות על פטנט. אין לשכפל או להעביר שום חלק ממסמך זה בשום אופן או אמצעי, אלקטרוני או מכני, לכל מטרה שהיא, ללא הסכמה מפורשת בכתב של DMT בע"מ. הנתונים כפופים לשינויים ללא הודעה מראש. מסירת מסמך זה אינה מעניקה לכם רישיון כלשהו בנוגע לפטנטים, סימנים מסחריים, זכויות יוצרים וזכויות קניין רוחני אחרות אלה, מלבד כאשר הדבר מצוין במפורש בהסכם כתוב כלשהו מטעם DMT בע"מ. המפרט הטכני כפוף לשינויים ללא הודעה מראש. Solio והלוגו של Solio הינם סימנים מסחריים רשומים של DMT בע"מ, רחוב משכית 8/א, הרצליה, 4673308, ישראל.

3.....	הכירו את Solio Alfa Cure+	1.
4.....	התוויות נגד ואזהרות	2.
7.....	אין להשתמש ב- Solio Alfa Cure+ במקרים הבאים:	3.
8.....	למה לצפות כשמתמשים ב- Solio Alfa Cure+	4.
9.....	הכירו את Solio Alfa Cure+	5.
12.....	בואו נתחיל!	6.
12.....	לאחר הטיפול	7.
13.....	תחזוקה ואחסון	8.
13.....	שירות לקוחות	9.
14.....	אחריות	10.
16.....	פתרון בעיות	11.
17.....	מחזור וסיוע בהגנת הסביבה	12.
18.....	מפרט טכני	13.
19.....	סימנים וסמלים	14.
20.....	תיוג	15.
20.....	עקומות הספק מוצא	16.
20.....	תוצאות בדיקות תאימות אלקטרומגנטית	17.

1. הכירו את Solio Alfa Cure+

Solio Alfa Cure+ הוא מכשיר המיועד להקלה על כאב והאצת ריפוי מקור הכאב המבוסס על 3 סוגי אנרגיה: IR energy, LLLT energy (soft lazer), Bi-polar RF energy.

Solio Alfa Cure+ מטפל ביעילות בכאבים הנובעים מפציעות ספורט, כאב כרוני, טראומה או מחזור חודשי. זהו מכשיר חשמלי רב עוצמה, ויש להשתמש בו תוך הקפדה על הוראות הבטיחות. הקפידו לקרוא את כל האזהרות, התוויות הנגד והוראות הבטיחות לפני השימוש, ופעלו לפיהן בקפידה. אנו ממליצים לקרוא מחדש את ההוראות לפני כל טיפול.

1.1 תכולת האריזה

אריזת Solio Alfa Cure+ כוללת:

- מכשיר Solio Alfa Cure+
- ספק כח
- ג'ל Slider
- מדריך למשתמש

1.2 תיאור המכשיר

Solio Alfa Cure+ הוא מכשיר לשימוש אישי המיועד להקל על כאבים ולהאיץ את ריפוי מקור הכאב. למכשיר יש רצועה מתכווננת (1), כפתור הפעלה (2), 3 נוריות חיווי (3, 4), (5), משטח טיפול עם 4 אלקטרודות (6), ספק כח (7). עיינו בתרשים שבתחילת מדריך זה כדי לראות את המיקום של כל רכיב ב- Solio Alfa Cure+.

1.3 שימוש ייעודי

Solio Alfa Cure+ מיועד להקל על כאב ולהאיץ את ריפוי מקור הכאב. השימושים האופייניים הם להקלה על כאבי שרירים, עוויתות בשרירים, גב תפוס, נקעים, מפרקים נוקשים או נפוחים, דלקת מפרקים קלה, תסמונת מנהרת שורש כף היד (תעלה קרפלית), מרפק טניס, פציעות בגידים, כאבים ניוורפטיים, דלקות כלליות או כאבי מחזור.

2. התוויות נגד ואזהרות

מכשיר זה לא נועד לשימושם של אנשים הסובלים מפגיעה ביכולות פיזיולוגיות, תחושתיות, נפשיות, הינם חסרי ניסיון או ידע, אלא אם הדבר נעשה תחת השגחה או הדרכה לשימוש במכשיר מצד אדם האחראי לבטיחותם. הקפידו להרחיק את המכשיר מהישג ידם של ילדים.

אין להשתמש ב- Solio Alfa Cure+ לשום מטרה מלבד זו שמתוארת במדריך זה.

אין להשתמש ב- Solio Alfa Cure+ במקרים הבאים:

- יש לכם היסטוריה של סרטן עור או אזורים עם פוטנציאל לגידולים ממאירים. 
- עברתם טיפול בסטרואידים לעור בחודש האחרון באזור המטופל. 
- עברתם הקרנות או טיפולי כימותרפיה בשלושת החודשים האחרונים. 
- יש לכם קוצב לב, הפרעת קצב או בעיה חמורה ידועה אחרת בלב. 
- יש לכם שתלי מתכת או תכשיט פירסינג באזור הגוף המיועד לטיפול. 



יש לכם היסטוריה של מחלות המתפרצות בתגובה לחום, כגון הרפס סימפלקס חוזר, באזור שברצונך לטפל. במקרים אלה ניתן לטפל רק לאחר התייעצות עם רופא וקבלת טיפול מונע לפני השימוש במכשיר.



יש לכם מחלה הקשורה לרגישות לאור, כגון פורפיריה, מחלת עור הנגרמת מרגישות לאור, סרפדת שמש, זאבת או כל רגישות לאור. במקרה כזה יש להתייעץ עם רופא.



יש לכם סוכרת בלתי מאוזנת.



יש לכם הפרעות בקרישת הדם. במקרים אלה יש להתייעץ עם רופא לפני השימוש.



אם אתם מטופלים כעת או טופלתם לאחרונה בתרופות מרשם או תרופות מרשם לעור כגון: חומצות אלפא-הידרוקסיות (AHA), חומצות בטא-הידרוקסיות (BHA), Retin-A®, רטינואידים מקומיים, או חומצה אזלאית, יש להתייעץ עם רופא לפני השימוש במכשיר.



יש לכם מחלת עור כלשהי כגון הרפס פעיל, נקודות חומות או שחורות, סימני לידה, שומות, יבלות, אקזמה, פסוריאזיס או חבורות באזור הטיפול.



יש לכם פצעים פתוחים באזור הטיפול, יש להמתין לריפוי האזור לפני השימוש במכשיר בחלקן ספציפי זה.



יש לכם שתלי סיליקון באזור הטיפול.



סופלתם ב-Accutane® (איזוטרטינואין)/ רואקוטן לאחרונה, יש להתייעץ עם רופא.



אם אינכם בטוחים אם Solio Alfa Cure+ מתאים לשימוש על ידכם, יש להתייעץ עם רופא לפני השימוש. יש לפנות לרופא בכל ספק שמתעורר לגבי השימוש במכשיר.

אזהרות נוספות



אין להשתמש כשאת בהריון או מניקה.



אין להשתמש על הפנים.



אם אתם חשים אי נוחות באזור הטיפול כאשר המכשיר מכוון למצב טיפול ברירת מחדל (3 נוריות חיווי דולקות), יש לעבור למצב טיפול המיועד לאזורי טיפול קטנים (2 נוריות חיווי דולקות).



אין להשתמש במצב טיפול ברירת מחדל (3 נוריות חיווי דולקות) ובמצב טיפול המיועד לאזורים קטנים (2 נוריות חיווי דולקות) כאשר אזור הטיפול נפוח, חם, מאובחן כדלקתי או כאשר אתם סובלים מדליות. במצבים אלו, יש לכוון את המכשיר למצב טיפול במצבי דלקת (נוריות חיווי 1 דולקת) ולטפל.



יש להסיר את כל התכשיטים לפני הטיפולים.



אין להשתמש ליד או בתוך אמבטיה, מקלחת, כיור או שאר מתקנים המיועדים להכיל מים. אין להניח או לאחסן את המכשיר במקום שיש סכנה שיפול לתוך אמבטיה או כיור או כל כלי אחר היכול להכיל מים או כל מקור מים. קיימת סכנת התחשמלות. יש לנתק מיד מהחשמל אם המכשיר בא במגע עם מים.



לעולם אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה כשהוא מחובר לשקע חשמל. התקע צריך להיות נגיש בכל עת, כדי שניתן יהיה להוציא אותו מהשקע בקלות במקרה חירום.



אין לשאת את המכשיר באמצעות כבל החשמל.



אין לנסות להכניס שינויים במכשיר Solio Alfa Cure+, לפתוח אותו או לתקן אותו. פעולה כזו עלולה לחשוף אתכם לרכיבים חשמליים מסוכנים ולגרום לכם נזק חמור.

3. אין להשתמש ב- Solio Alfa Cure+ במקרים הבאים:



אין להשתמש במתאמים, במפצלים ו/או בכבל מאריך או בכל אביזר או מכשיר נלווה אחר שלא אושר ע"י DMT Ltd.



כבל החשמל של המכשיר פגום. הרחיקו את כבל החשמל ממשטחים חמים.



בעת השימוש בו רואים או מריחים עשן.



המכשיר או משטח הטיפול סדוקים או פגומים.



המכשיר הופל או נפל על משטח קשה.



המכשיר אינו עובד כראוי, או נראה שהוא פגום באופן כלשהו.

במקרים אלו, פנו לשירות הלקוחות בטלפון 0775050300.

4. למה לצפות כשמתמשים ב-Solio Alfa Cure+

כל עוד ממלאים אחר ההנחיות במלואן ושמים לב לכל האזהרות והתוויות הנגד, נדיר שיופיעו סיבוכים ותופעות לוואי. אולם כל הליך טיפולי במכשירים מבוססי אנרגיה, לרבות אלו שנועדו לשימוש ביתי, כרוך בסיכון מסוים. לכן חשוב להבין ולקבל את הסיכונים והסיבוכים שעלולים להתרחש.

התחושות הבאות עשויות להופיע במהלך הטיפול:

● **תחושת חום:** אופיינית כשמתמשים במכשיר במצב ברירת מחדל (3 נוריות החיווי דולקות). התחושה אמורה להיעלם עד סוף הטיפול, או בתוך שעה. אם התחושה מציקה לכם, העבירו את המכשיר למצב טיפול המיועד לאזורי גוף קטנים (2 נוריות חיווי דולקות), והמשיכו לטפל (יש לעיין בסעיף 5.2 מצבי טיפול“).

● **העדר תחושה:** אופיינית כשמתמשים במכשיר כאשר הוא מכוון למצב המיועד לטיפול בכאבים המלווים בדלקת (נורית חיווי 1 בלבד דולקת). אל דאגה! המכשיר עדיין משחרר אנרגיה המקלה על הכאב, גם אם אינכם חשים בשום חמימות.

● **אדמומיות:** במהלך הטיפול או לאחריו העור עשוי להיעשות אדמומי או ורדרד. זוהי תופעה נורמלית, האדמומיות אמורה להיעלם בתוך שעה עד שעתיים.

● **נפיחות קלה:** נפיחות קלה עשויה להופיע באזור הטיפול, הנפיחות אמורה להיעלם בתוך שעה עד שעתיים.

● יש להפסיק להשתמש באופן מידי אם תופעות אלה מחמירות.

פנו לרופא אם תופעות אלו לא נעלמות תוך יומיים-שלושה. !

במקרים נדירים טיפול ב- Solio Alfa Cure+ עלול לגרום לתופעות הלוואי הבאות:

⦿ **אדמומיות ונפיחות משמעותיות או כוויות ושלפוחיות** - במקרים אלה יש לקרר מיידית את האזור בעזרת מטלית לחה או קרח למשך 10 דקות לפחות ולמרוח משחה לטיפול בכוויות. ברב המקרים תופעות אלו יחלפו תוך מספר ימים.

⦿ **נקודות אדומות באזור הטיפול** - במקרה זה יש לקרר את האזור באופן מידי במים קרים. תופעה זו עשויה להימשך מספר ימים.

! יש להתייעץ עם רופא במידה ותופעות אלו לא נעלמות.

5. הכירו את Solio Alfa Cure+

Solio Alfa Cure+ קל, נח ופשוט לשימוש.

5.1 הפעלה ותצוגה

⦿ **כפתור הפעלה (2):** לחצו על כפתור ההפעלה כדי להדליק את המכשיר, ולחצו לחיצה ארוכה כדי לכבות אותו.

⦿ **נוריות חיווי (3, 4, 5):** כל שלוש נוריות החיווי נדלקות עם הפעלת המכשיר. לחצו לחיצה קצרה על כפתור ההפעלה כדי לעבור בין המצבים (עיין בסעיף "5.2 מצבי טיפול").




המכשיר ישחרר אנרגיות לשיכוך כאב רק כאשר הוא מופעל, אזור הטיפול מרוח בג'ל Slider, משטח הטיפול נמצא במגע מלא עם העור, והמכשיר נמצא בתנועה על פני העור. 

5.2 מצבי טיפול

לשימוש נח וקבלת תוצאה מיטבית Solio Alfa Cure+ מציע שלושה מצבי טיפול המתאימים לסוגי הכאב השונים ואזורי הטיפול בגוף

נוריות חיווי

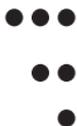


סוגי כאב ואזורי הטיפול

רוב סוגי הכאבים, ורוב חלקי הגוף (זהו מצב ברירת המחדל של המכשיר)
אזורים קטנים (לדוגמה, כפות הידיים, קרסוליים)
אזורים חמים ונפוחים, אזורים שאובחנו כמודלקים, אזורים עם דליות.

כשהמכשיר נמצא במצב טיפול המיועד לאזורים דלקתיים (רק נורית חיווי 1 דולקת).
במצב טיפול זה לא תחושו בחום האופייני לשימוש במצבי הטיפול האחרים של Solio Alfa Cure+. 

5.3 התאמת הרצועה לאחיזה נוחה

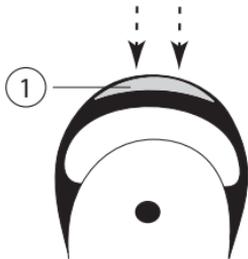

אם הרצועה הדוקה מדי, ניתן להסיר את חלק הגומי (1).

● כדי לשחרר את הגומי, לחצו על החלק העליון של הרצועה, עד שחלק הגומי קופץ החוצה.

● כדי להחזיר את חלק הגומי, הצמידו אותו לחלק התחתון של הרצועה, ודחפו בחזרה למקום.

5.4 תוכנית טיפולים מומלצת

בכל שימוש ב- Solio Alfa Cure+ יש לטפל באזור הכאב במשך 10 עד 20 דקות. להלן סדרת טיפולים מומלצת:

● בכל סוגי הכאבים יש לטפל עד פעמיים ביום במשך 10 הימים הראשונים.

● אם אתם עדיין חשים כאב לאחר 10 ימים, יש להמשיך ולטפל פעם ביום עד 90 יום.

● אם אתם עדיין חשים בכאב לאחר 90 יום, המשיכו לטפל בין 2-3 פעמים בשבוע עד שהכאב יעלם.

סדרת טיפולים מומלצת



יש להשתמש ב- Solio Alfa Cure+ רק כאשר אתם חשים בכאב.



6. בואו נתחיל!

1. הוציאו את Solio Alfa Cure+ ואת כל שאר הרכיבים מהאריזה.
2. חברו את כבל החשמל לתוך השקע המתאים במכשיר וחברו את כבל החשמל לשקע החשמל.
3. ודאו שהעור נקי ויבש, ומרחו שכבה של ג'ל Slider על אזור הטיפול.
4. לחצו על כפתור ההפעלה. כל שלוש נוריות החיווי דולקות, והמכשיר מוכן לפעולה במצב ברירת מחדל.
5. בחרו את מצב הטיפול הרצוי בהתאם לסוג הכאב (עיינו בסעיף "5.2 מצבי טיפול").
6. הצמידו את משטח הטיפול של המכשיר אל העור באזור הכאב. המכשיר יתחיל לפעול ותראו אור LED אדום סביב משטח הטיפול. הניעו את המכשיר על גבי העור בתנועה מעגלית לפרק הזמן המומלץ (עיינו בסעיף "5.4 תוכנית טיפולים מומלצת"). אם אור ה-LED האדום נעלם תוך כדי תנועה, הצמידו בצורה טובה יותר את משטח הטיפול אל העור או הוסיפו ג'ל Slider להולכה טובה יותר של האנרגיה.

7. לאחר הטיפול

- לאחר סיום הטיפול:
1. כדי לכבות את המכשיר, לחצו לחיצה ארוכה על כפתור ההפעלה.
 2. הוציאו את התקע משקע החשמל.
 3. אנו ממליצים לשטוף את אזור הטיפול כדי להסיר את שאריות הג'ל.

8. תחזוקה ואחסון

חשוב לנקות את המכשיר לאחר כל טיפול.

נתקו את המכשיר מהחשמל. 

נקו את המכשיר ואת משטח הטיפול במטלית נקייה ולחה. ניתן להשתמש בחומר ניקוי המכיל עד 70% אלכוהול, אך לעולם אין להשתמש באצטון או בחומרי ניקוי חריפים אחרים, כיוון שהם יגרמו נזק למכשיר. 

לאחר הניקוי, אנו ממליצים לאחסן את המכשיר באריזתו המקורית. 

לעולם אין להשרות במים את המכשיר או את אחד מחלקיו. 

9. שירות לקוחות

למידע נוסף על Solio Alfa Cure+, בקרו באתר שלנו www.solio.co.il. במקרה של בעיה במכשיר, ניתן לפנות לשירות הלקוחות בדוא"ל contact@soliotherapy.com, או להתקשר לטלפון 0775050300.

מה נכלל בתעודת אחריות זו?

חברת DMT Ltd, סניפיה הרלוונטיים (להלן: DMT Ltd) או המפיץ המורשה ממנו

רכשת את מוצר שברשותך (להלן: המכשיר) יתקנו או יחליפו את המכשיר, אם יתגלו במכשיר ליקויים מהותיים כלשהם שנגרמו על ידי DMT Ltd במהלך תקופת האחריות, בין אם בגוף המכשיר או בפעולתו.

מי זכאי לאחריות בכפוף לתעודת אחריות זו?

רק אתה, הרוכש המקורי של המכשיר, אשר רכש את המכשיר מחברת DMT Ltd או ממפיץ מורשה שלה, זכאי לאחריות כמפורט בתעודת אחריות זו. על מנת להיות זכאי לשירות במסגרת האחריות, עליך לספק הוכחה להיותך הרוכש המקורי של המכשיר באמצעות הצגת קבלה מקורית עבור רכישת המכשיר. אחריות זו אינה אחריות בינלאומית. האחריות תכובד אך ורק במדינה בה נמצאים המפיץ המורשה או הנציגות של DMT Ltd מהם רכשת את המכשיר.

מהי התקופה הכלולה בתעודת אחריות זו?

תעודת אחריות זו מכסה בקשות לתיקונים המתקבלות במהלך שנה אחת (1) מן המועד המקורי של רכישת המכשיר. בקשות לתיקונים המתקבלות לאחר שנה אחת (1) ממועד הרכישה אינן מכוסות על ידי תעודת אחריות זו. בקשות לתיקונים עבור מכשיר שתוקן או הוחלף חייבות להיות מוגשות לא יאחר מ: (א) שנה אחת (1) מן המועד המקורי של רכישת המכשיר או (ב) תשעים (90) יום מן המועד בו הוחזר אליך המכשיר המתוקן או החלופי, המאוחר מביניהם. אם למכשיר שברשותך צמודה מד בקה המציינת תקופת אחריות הארוכה מזו המציינת לעיל, תקופת האחריות המציינת על המד בקה תהיה תקפה, והמכשיר יתוקן או יוחלף במסגרת האחריות עד תום תקופה זו.

אם רכשת את המכשיר במדינה המשתייכת לאיחוד האירופי, עומדת לרשותך שנה נוספת (לפי צו האיחוד האירופי 1999/44) להגשת תלונות בגין ליקויים או פגמים במכשיר שברשותך, אשר היו נוכחים בעת הרכישה, אך לא נצפו בבירור באותו מועד, כפי שנקבע על ידי DMT Ltd או המפיץ המורשה. על מנת להפעיל אחריות מורחבת זו, עליך לפנות למפיץ המורשה ממנו רכשת את המכשיר או למרכז השירות המקומי ולדווח להם על הפגם בייצור באופן מיידי, ולא יאוחר מ-60 יום לאחר גילוי הפגם.

כיצד ניתן לקבל שירות במסגרת אחריות זו?

ייתכן כי בעת פניה לשירות לקוחות תתבקש למלא טופס להחזרת המוצר ותקבל מספר פניה. במקרה של ליקוי שאינו מכוסה על ידי האחריות מסיבה כלשהי, חברת DMT Ltd יכולה לחייב אותך בהוצאות משלוח ותיקון אם הסכמת לתקן את המכשיר על חשבונך.

מה לא נכלל בתעודת אחריות זו?

תעודת אחריות זו אינה מכסה נזק כלשהו הנובע מתאונה, משימוש שגוי (לרבות שימוש במכשיר שלא כפי שמתואר בהוראות השימוש הנלוות למכשיר), משימוש לקוי, מהיעדר טיפול סביר, משימוש בלתי סדיר ובלתי סביר הכולל שימוש מסחרי או מקצועי ללא הגבלה, מהוספת חלקים שאינם מסופקים יחד עם המכשיר, מאובדן חלקים, משימוש בחלקי חילוף ללא היתר או חשיפת המכשיר לזרם חשמלי השונה מן הזרם המצוין. האחריות תבוטל אם המכשיר טופל על ידי אדם שאינו מוסמך על ידי DMT Ltd, וחברת DMT Ltd לא תישא באחריות לנזק כלשהו הנובע מתיקונים שבוצעו על ידי אדם שאינו מוסמך על ידי DMT Ltd. האחריות אינה מכסה החלפת חלקים מתכלים.

פטור מאחריות

האחריות המפורשת המוצגת במסמך זה היא במקום כל אחריות אחרת, לרבות אחריות משתמעת של סחירות והתאמה לייעוד מסוים. אחריות זו מהווה מענה בלעדי וייחודי לפגם כלשהו במכשיר.

מגבלות

חברת DMT Ltd, סניפיה או מפיציה המורשים לא יהיו אחראים לנזקים עקיפים, מיוחדים, נזקי ענישה והרתעה, נזקים מקריים או תוצאתיים (לרבות, בין היתר, נזקים בשל אובדן או חיובים בגין ציוד חלופי), ללא תלות בתיאוריה המשפטית עליה מבוססת התביעה, אף אם הם יודעו בדבר האפשרות לנזקים מסוג זה. במקרה שבו יוחלט כי המענה המוצג בתעודת אחריות זו כשל בייעודו המהותי אם או יוחלט כי חברת DMT Ltd, סניפיה או מפיציה המורשים אחראים לנזקים על סמך תיאוריה משפטית כלשהי, אחריותם של חברת DMT Ltd, סניפיה או מפיציה המורשים לא תעלה על מחירה הקמעונאי של יחידה אחת של המכשיר, נכון למועד התרחשות הסיבה להליך. אתה נוטל על עצמך את כל הסיכונים והאחריות לאובדן, נזק או פגיעה בך, ברכושך, באחרים וברכושם כתוצאה משימוש או משימוש לרעה במכשיר, או כתוצאה מהיעדר יכולת להשתמש במכשיר, למעט היקף הנזק הנובע ישירות מרשלנותה של DMT Ltd.

תעודת אחריות זו מעניקה לך זכויות חוקיות ספציפיות, ואתה עשוי להיות בעל זכויות נוספות המשתנות ממדינה למדינה. מדינות מסוימות אינן מתירות אי הכללה או הגבלת אחריות לנזקים מקריים או תוצאתיים או אחריות משתמעת, לפיכך ייתכן כי הפטורים והמגבלות שלעיל אינם רלוונטיים לגביך.

11. פתרון בעיות

אין לנסות לפתוח את המכשיר או לתקן אותו. פעולה כזו עלולה לחשוף אתכם לרכיבים חשמליים מסוכנים ולגרום לכם נזק חמור. פעולה זו גם תבטל את תוקף האחריות.

בדיקות	בעיה
<p>ודאו שספק הכח מחובר בצורה תקינה למכשיר, שהתקע מוכנס לשקע החשמל בקיר, ושלחצתם על כפתור ההפעלה.</p>	<p>אי אפשר להפעיל את מכשיר Solio Alfa Cure+ שברשותי!</p>
<p>ודאו את הדברים הבאים:</p> <ul style="list-style-type: none"> • המכשיר מחובר לחשמל ומופעל • מרחתם ג'ל Slider • משטח הטיפול נמצא במגע טוב עם העור • המכשיר נמצא בתנועה על פני אזור הטיפול 	<p>המכשיר פועל אך אינו מפיץ חום ואור.</p>
<p>קרתה תקלה במכשיר. נתקו את המכשיר והפעילו מחדש.</p>	<p>נורית אחת או יותר מהבהבת.</p>

במקרה של בעיה או שאלה, ניתן לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות שלנו בטלפון: 0775050300.

12. מחזור וסיוע בהגנת הסביבה

סייעו בהגנת הסביבה. אין להשליך לפח עם פסולת ביתית. הקפידו לפעול לפי התקנות להשלכת פסולת אלקטרונית.



13. מפרט טכני

H2101/H2102	מס' דגם:
BF	חלק פעיל במגע ישיר
(EN60529) IP30	דירוג הגנה
נורות LED אורך גל בפליטת שיא: 630 נ"מ ± 10 נ"מ אורך גל של נורת LED אינפרא-אדום: 850 נ"מ ± 50 נ"מ	מקור אור
1 מגה-הרץ ±30%; 24 ואט מקסימום	תדר רדיו
22 ס"מ × 22 ס"מ × 14 ס"מ	גודל החבילה
200 גרם	משקל המערכת
טמפרטורה: מינוס 40° עד 70°C לחות יחסית: 10% עד 90% לחץ אטמוספרי: 1060 - 500 hPa	הובלה ואחסון בין שימושים ותנאי אחסון
טמפרטורה: 10°C עד 35°C לחות יחסית: 30% עד 75% לחץ אטמוספרי: 1060 - 700 hPa	תנאי פעולה
דגם: KSAPVO361200300D5	דגמים ודירוג של מתאמים
כניסה: 100-240V; 50-60Hz; 0.9A יציאה: 12V DC; 3A	

14. סימנים וסמלים

	<p>מוצרים המסומנים בסמל זה ממלאים את דרישות הנחיות האיחוד האירופי.</p>
	<p>רמת הגנה מפני התחשמלות. חלק פעיל במגע ישיר בדירוג BF.</p>
	<p>אין להשליך לפח עם פסולת ביתית. יש לפעול בהתאם לתקנות להשלכת פסולת, כדי לסייע בהגנת הסביבה. בהתאם להנחיות WEEE (השלכת פסולת אלקטרונית).</p>
	<p>שמור יבש.</p>
	<p>פעל לפי הוראות השימוש.</p>
	<p>צויד זה מספק במכוון אנרגיית אינפרא-אדום בלתי מייננת.</p>
<p>IP30</p>	<p>לא אטום לנוזלים.</p>

15. תיוג

עיינו בסעיף הרלוונטי באנגלית.

16. עקומות הספק מוצא

עיינו בסעיף הרלוונטי באנגלית.

17. תוצאות בדיקות תאימות אלקטרומגנטית

עיינו בסעיף הרלוונטי באנגלית.

حقوق النشر © 2019 DMT Ltd.
جميع الحقوق محفوظة.

إشعار قانوني

تحتفظ لنفسها بحق القيام بتغييرات في منتجاتها وخصائصها من أجل تحسين الأداء والمتانة أو التصنيع. المعلومات المزودة من DMT Ltd. هي دقيقة وصالحة في وقت نشرها. لكن DMT Ltd. لا تتحمل أي مسؤولية تجاه استخدامها. لا يمكن الحصول على ترخيص من خلال تضمينها أو تحت أي براءة اختراع أو حقوق براءة اختراع. لا يجوز استنساخ أي جزء من هذا المستند أو نقله بأي شكل أو بأي وسيلة، إلكترونية أو ميكانيكية، لأي غرض كان، دون الحصول على إذن خطي واضح من قبل DMT Ltd. البيانات عرضة للتغيير من دون أي إشعار. تزويد هذا المستند لا يعطيك أي ترخيص لبراءات الاختراع هذه، أو العلامات التجارية أو حقوق الطبع أو حقوق ملكية أخرى ما عدا تلك المتفق عليها خطياً من DMT Ltd.

Solio وشعار Solio هما علامتان تجاريتان مسجلتان
DMT Ltd المحدودة، شارع ماسكيت 8 / A، هرتسليا، 4673308، إسرائيل.

1. تعرّفوا على Solio Alfa Cure+ الخاصّ بكم 23
2. موانع الاستعمال والتحذيرات 24
3. لا تستعملوا Solio Alfa Cure+ إذا: 27
4. ما الذي تتوقّعونه عند استعمال Solio Alfa Cure+ الخاصّ بكم 28
5. تعرّفوا على Solio Alfa Cure+ الخاصّ بكم 29
6. ابدأوا! 32
7. بعد العلاج 32
8. الصيانة والتخزين 33
9. خدمة الزبائن 33
10. الضمان 34
11. حلّ المشاكل 37
12. التخلّص من الجهاز 37
13. الخصائص 38
14. العلامات والإشارات 39
15. وسم 40
16. الرسوم البيانية 40
17. نتائج الاختبارات 40

1. تعرّفوا على Solio Alfa Cure+ الخاصّ بكم

Solio Alfa Cure+ هو جهاز يهدف لتخفيف الألم وتسريع شفاء مصدر الألم المرتكز على ثلاثة أنواع من الطاقة: Bi-polar RF energy, LLLT energy, IR energy.

+Solio Alfa Cure يقوم بتسكين الألم الناتج عن الإصابات الرياضيّة، الألم المزمن، ألم الرضّ أو الحيض. إنّه جهاز إلكترونيّ قويّ ويتوجّب استعماله مع انتباه شديد للسلامة. تأكدوا من قراءة جميع التحذيرات، موانع الاستعمال واحتياطات الأمان قبل الاستعمال، واتّبعتها بشكل صارم. نوصيكم بأن تجدّدوا معرفتكم بالتعليمات قبل كل علاج.

1.1 محتويات العبوة

عبوة Solio Alfa Cure+ الخاصّة بكم تشمل:

- جهاز التسكين
- دليل المستخدم
- مهالي (محوّل) مع سلك
- هلام (جل) يساعد على الانزلاق

1.2 وصف الجهاز

+Solio Alfa Cure هو جهاز يُحمل باليد ويقوم بتسكين الألم. للجهاز حزامٌ قابل للضبط (#1)، زرّ تحكّم (#2)، 3 أضواء مؤشّرة (3،4،5#)، مسطح العلاج مع 4 أقطاب كهربائيّة (#6)، ومحوّل التيار المتردّد/الثابت AC/DC مع سلك (#7). راجعوا الرسم التخطيطيّ في مقدّمة هذا الكتيّب لرؤية موقع كل واحد من اجزاء +Solio Alfa Cure الخاصّ بكم.

1.3 الاستعمال المخصّص

Solio Alfa Cure+ مخصّص لتسكين الألم. الاستعمالات النموذجية هي تسكين آلام العضلات، التشنّجات العضليّة، الأعصاب المحتبسة، الالتواءات، المفاصل المتصلبة أو المنتفخة، التهاب المفاصل الثانوي، متلازمة النفق الرسغي، التهاب مفصل المرفق، إصابات الأوتار، ألم الاعتلال العصبي، الالتهابات العامّة، أو ألم الحيض.

2. موانع الاستعمال والتحذيرات

لا يجوز استعمال هذا الجهاز من قِبل: الأطفال، البالغين ذوي القدرات البدنيّة، الحسيّة أو النفسانيّة المحدودة، أو أولئك الذين يفقدون الخبرة أو المعرفة في تشغيل الجهاز. يجب مراقبة الأطفال للتأكد بأنهم لا يلعبون بالجهاز.

لا تستعملوا Solio Alfa Cure+ لأيّ غرض آخر غير المذكور في دليل المستخدم.

لا تستعملوا Solio Alfa Cure+ إذا:

- ! كان لديكم ماضٍ من سرطان الجلد أو مناطق في الجلد ذات أرجحية للأورام الخبيثة.
- ! قمتم بدهن الستيرويدات الموضعية على منطقة العلاج خلال الشهر الأخير.
- ! خضعتم لعلاج بالإشعاع أو علاجات كيميائية خلال الأشهر الـ 3 الماضية.
- ! كان لديكم ناظمة قلبية، اضطرابات النظم القلبي أو أي اضطراب قلبي خطير معروف آخر.

كان لديكم جهاز معدنيّ مزروع، أو مجوهرات مغروزة في منطقة العلاج.



عندكم ماض من الأمراض التي تنشط بواسطة الحرارة، مثل الهريس البسيط المتكرّر في منطقة العّلاج، إلا إذا استشرتم طبييكم، وتلقيتم علاجًا مانعًا قبل استعمال الجهاز.



كنتم تعانون من مرض يتعلّق بالحساسيةّ للضوء، مثل الثُرْفيريّة، الطفح الضوئيّ متعدّد الأشكال، الشرى الشمسيّة، الذنبة الحُماميّة، إلخ.



كان لديكم سكرّي غير خاضع للسيطرة.



كانت لديكم اضطرابات في تحنّر الدم. استشرتم طبييكم قبل المعالجة.



قتم مؤخرًا بمعالجة المنطقة المقصودة بأيّ من المواد الموضعيّة التالية: أحماض الألفا هيدروكسي (AHAs)، أحماض البيتا هيدروكسي (BHAs)، ريتين-إيه (Retin-A®)، الريتينويدات، حمض الأزيلايك، أو أيّ دواء آخر وصفه لكم الطبيب. استشرتم طبييكم قبل الاستعمال!



أيّة حالة جلديّة مثل الهريس النشط، بما في ذلك البقع البنيّة أو السوداء، علامات الولادة، الشامات، الثآليل، الإيكزيما، الصدقيّة أو الأفات في منطقة العلاج.



الجروح المفتوحة في منطقة العلاج. انتظروا حتى تتماثل المنطقة إلى الشفاء قبل استعمال الجهاز في الجزء المحدّد من الجسم.



غروس السيليكون في منطقة العلاج.



تلقّيتُم مؤخرًا علاجًا بـ (Accutane®) (isotretinoin). استشيروا طبيبكُم.



كانت لديكم أيّة حالة تجعل استعمال Solio Alfa Cure + غير آمن لكم، بحسب رأي طبيبكُم.



تحذيرات أخرى

لا تستعمليه إذا كنتِ حاملاً أو مرضعاً.



لا تستخدمها على الوجه.



إذا شعرتم بأيّ عدم ارتياح عند استعمال وضعيّة العلاج الاعتياديّة، فاضبطوا الجهاز على وضعيّة العلاج المصمّمة للمناطق الصغيرة (ضوءان مضيئان).



لا تستعملوا وضعيّة التشغيل الاعتياديّة (3 أضواء) أو وضعيّة التشغيل الخاصّة بالمناطق الصغيرة (ضوءان) لعلاج مناطق ساخنة، متنفخة، مناطق شُخصت بأنّها ملتهبة، أو مناطق فيها أوردة دواليّة. عند معالجة هذه المناطق، اضبطوا الجهاز دائماً على وضعيّة الالتهاب (ضوء واحد).



يجب إزالة جميع المجوهرات قبل العلاج.



لا تستعملوه بالقرب من أحواض الاستحمام(البانيو)، دشّ المياه، الأحواض (المغاسل) أو أيّة أوعية مياه أخرى. لا تضعوا الجهاز أو تخزّنوه في مكان يمكن أن يعرضه للسقوط، الدفع أو في أيّ مكان آخر بجانب المياه. هناك خطر للصعق الكهربائيّ. افصلوا الجهاز عن الكهرباء فوراً إذا لامس الماء.



إشعار



لا تتركوا الجهاز أبداً دون مراقبة عندما يكون موصولاً بمخرج كهربائي. اجعلوا محوّل التّيّار المتردّد/الثابت AC/DC في متناول اليد دائماً، بحيث يمكن إزالته بسهولة من المقبس في حالة الطوارئ.



لا تحملوا الجهاز من سلك محوّل التّيّار المتردّد/الثابت AC/DC.



لا تحاولوا أن تعدّلوا، تفتحوها أو تصلّحوا جهاز الخاصّ بك. قد تعرّضوا انفسكم لمكوّنات كهربائيّة خطيرة وتسبّب أذى شديداً لانفسكم.

3. لا تستعملوا Solio Alfa Cure+ إذا:



لم يكن المحوّل، المرفقات أو الأدوات التابعة للجهاز مرخّصة من قِبَل DMT Ltd.



احتوى الجهاز على سلك أو محوّل متضرّر. احتفظوا بسلك التشغيل بعيداً عن الأسطح الساخنة.



رأيتم دخاناً أو شممتم رائحة دخان عند الاستعمال.



كان غلاف الجهاز أو مسطح العلاج منثّقين أو متضرّرين.



سقط الجهاز أو وقع على مسطح صلب.



كان الجهاز لا يعمل كما ينبغي، أو يبدو متضرّراً بأيّ شكل آخر.

في حالات كهذه، اتصلوا بخدمة الزبائن.

4. ما الذي تتوقعونه عند استعمال Solio Alfa Cure+ الخاص بكم

إذا قمتم بالاستعمال وفق الإرشادات بشكل تامّ وأعرتم انتباهكم لجميع التحذيرات وموانع الاستعمال، فإنّ التعقيدات والآثار الجانبية غير شائعة. على أية حال، فإنّ أيّ جهازٍ يركّز على الطاقة، بما في ذلك الأجهزة المصمّمة للاستعمال البيئيّ، يتضمّن درجة معيّنة من الخطورة. لذلك من المهمّ أن تفهموا وتتقبّلوا المخاطر والتعقيدات التي قد تحدث.

أثناء الجلسة العلاجية، من الطبيعيّ أن تجرّبوا أو تشعروا بـ :

- شعور بالدفع: هذا شيء نموذجي عند استعمال الجهاز بوضعيّة 'default mode' (تكون الأضواء المؤشرة الـ 3 مضيئة). ينبغي أن يخفّي الشعور مع انتهاء العلاج، أو في غضون ساعة. إذا كان الشعور غير مريح بالنسبة لكم، فأكملوا العلاج باستعمال ضبط ضوءين مؤشرين (راجعوا القسم "5.2 وضعيات العلاج").
- لا شيء على الإطلاق: هذا شيء نموذجي عند استعمال الجهاز بوضعيّة 'inflammation mode' (يكون ضوء مؤشر 1 مضيئاً). لا تقلقوا! لا يزال الجهاز يبعث طاقة مسكنة للألم، حتّى لو لم تشعروا بأيّ دفع.
- بعض الاحمرار: ليس غريباً أن تروا قليلاً من تلون الجلد الخفيف المائل إلى الوردّي خلال العلاج أو مباشرةً بعده. مرّة أخرى، هذا شيء طبيعيّ ويفترض أن يتلاشى خلال ساعة أو ساعتين.
- انتفاخ طفيف في المنطقة المعالجة: يُفترض أن يخفّي هذا أيضاً خلال ساعة أو ساعتين.
- توقّفوا فوراً عن الاستعمال إذا كان أحد هذه الأعراض أشدّ خطورةً.

! راجعوا طبيبيكم إذا لم تزل هذه الأعراض خلال 2 إلى 3 أيام.

في حالات نادرة، قد يتسبب العلاج بواسطة Solio Alfa Cure+ في:

● انتفاخ وإحمرار مفرطين، أو حروق وحويصلات. إذا حدث ذلك، فاستعملوا فوراً قطعة قماش مبللة باردة لتبريد المنطقة لمدة 10 دقائق على الأقل وادهنوا كريماً مضاداً للحروق. في معظم الحالات، تتلاشى ردود الفعل هذه خلال بضعة أيام.

● بقع حمراء في منطقة العلاج قد تبقى لبضعة أيام. إذا حدث ذلك، فإبنا نوصي بتبريد المنطقة فوراً بالماء المتلج.

! استشيروا طبيبيكم إذا استمرت هذه الأعراض.

5. تعرّفوا على Solio Alfa Cure+ الخاصّ بكم

Solio Alfa Cure+ هو بسيط الاستعمال.

5.1 لوحة التحكم في الجهاز

● زرّ التحكم (2): اضغطوا هذا الزرّ لتشغيل الجهاز، واضغطوا بشكل مطوّل لإيقاف تشغيله.

● الأضواء (3، 4، 5):

تضيء الأضواء الـ 3 جميعها عندما يكون الجهاز شغّالاً. ضغطة خفيفة للتنقل بين الوضعيات (راجع القسم "5.2 وضعيات العلاج").



يقوم الجهاز ببثّ الطاقة فقط عندما يكون شغّالاً، وقد قمتّم بدهن الهلام (الجل)،
و **مسطح العلاج** يلامس الجلد بشكل جيد، وأنتم تقومون بتحريكه وتمريره على
جلدكم.



5.2 وضعيات العلاج

للحصول على الراحة والمرونة القصوى والتأثير الأكبر، فإنّ لـ Solio Alfa Cure+ ثلاث
وضعيات للعلاج، لتتناسب مع نوع الألم وجزء الجسم الذي يتمّ علاجه.

الأضواء



أنواع الألم ومنطقة العلاج

معظم أنواع الألم، ومعظم أجزاء الجسم

المناطق الصغيرة (مثل الكفّين، الكاحلين)


المناطق الساخنة، المنتفخة، أو المناطق المشخّصة بأنّها ملتهبة، أو
المناطق التي فيها أوردة دواليّة.

عندما يكون الجهاز بوضعيّة 'inflammation mode' (فقط ضوء مؤشّر
واحد مضيء)، فإنكم لن تشعروا بالدفء النموذجي كما في استعمال وضعيات
العلاج الأخرى لـ Solio Alfa Cure+.



5.3 ضبط الحزام

إذا كان الحزام ضيقاً أكثر من اللازم، فبإمكانكم إزالة الجزء
المطاطي (#1).

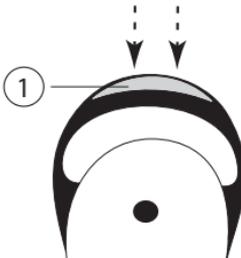

لتحرير هذا الجزء، اضغطوا على قمة الحزام حتّى يقفز
خارجاً.



العلاج

● لإعادة هذا الجزء إلى مكانه، قوموا بإدراجه من الأسفل واضغطوه لتعيده إلى مكانه.


5.4 خطة العلاج

جلسة علاجية كاملة بواسطة Solio Alfa Cure+ تستغرق 10-20 دقيقة فقط.

المدة بين العلاجات

- ابدأوا بالمعالجة حتى مرتين في اليوم لمدة أقصاها 10 أيام.
- إذا استمرّ الألم لأكثر من 10 أيام، فأكملوا المعالجة مرة واحدة في اليوم لمدة أقصاها 90 يوماً.
- إذا استمرّ الألم بعد ذلك، فأكملوا المعالجة 2-3 مرات في الأسبوع، حتى يخفّي الألم.

المدة بين العلاجات

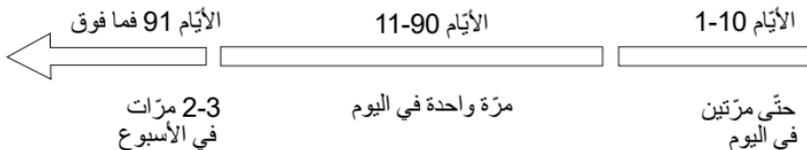

● استعملوا Solio Alfa Cure+ فقط طالما هناك شعور بالألم.

6. ابدأوا!

لاستعمال Solio Alfa Cure+ الخاص بكم، اتبعوا هذه الخطوات:

1. أخرجوا الجهاز والأجزاء الأخرى من العلبة.
2. قوموا بوصول سلك المحوّل بمقبس الجهاز ووصل المحوّل بمخرج كهربائيّ.
3. تأكدوا من نظافة وجفاف جلدكم، ثم ادهنوا طبقة خفيفة من الهلام (الجل) ، المساعد على الانزلاق، على منطقة العلاج.
4. اضغطوا على زرّ التحكّم. جميع الأضواء المؤشّرة الثلاثة ستضيئ، وجهازكم أصبح جاهزاً.
5. اضبطوا وضعيّة العلاج على المنطقة التي تعالجونها (راجعوا القسم "5.2 وضعيات العلاج").
6. ضعوا مسطحّ العلاج على جلدكم، ومروا الجهاز بحركة دائريّة على جلدكم للمدّة الزمنيّة الموصى بها (راجعوا القسم "5.4 خطة العلاج").

7. بعد العلاج

عند انتهائكم من جلستكم العلاجيّة:

1. لإيقاف تشغيل الجهاز، اضغطوا مطوّلاً على زرّ التحكّم.
2. افصلوا المحوّل عن المخرج الكهربائيّ.
3. نوصيكم بشطف منطقة العلاج لإزالة بقايا الهلام المساعد على الانزلاق.

8. الصيانة والتخزين

من الضروري أن تتنظفوا جهازكم بعد كل علاج.

افصلوا الجهاز عن الكهرباء. ⚙️

استعملوا قطعة قماش نظيفة ومبلّلة لتنظيف الجهاز ومسّح العلاج. بإمكانكم استعمال سوائل تنظيف تحتوي على ما لا يزيد عن 70% من الكحول، لكن لا تستعملوا الأسيتون أبداً ولا أية سوائل كاشطة أخرى، لأنها ستسبب الضرر لجهازكم. ⚙️

بعد التنظيف، نوصيكم بتخزين الجهاز في علبته الأصلية. ⚙️

لا تغمروا جهازكم أو أيّاً من أجزائه في الماء أبداً. !

9. خدمة الزبائن

لمزيد من المعلومات حول Solio Alfa Cure + ، تفضل بزيارة موقعنا على الإنترنت www.solio.co.il. في حالة وجود مشكلة على جهازك، يمكنك الاتصال بخدمة العملاء عن طريق البريد الإلكتروني contact@soliotherapy.com، أو الاتصال على هاتف 0775050300.

ماذا هو نطاق تغطية هذه الكفالة؟

إن DMT Ltd ، والشركات التابعة لها التي تنطبق (يشار إليها فيما يلي: DMT Ltd) أو المورّع المعتمد الذي قمت بشراء لخاص بك منه (يشار إليه فيما يلي: الجهاز) يجب أن تقوم بتصليح أو استبدال الجهاز، وذلك إذا تم اكتشاف أي عيوب في هيكل الجهاز والتي تسببت فيها DMT Ltd خلال فترة الكفالة، سواءً كان ذلك في جسم الجهاز أو في تشغيله.

لمن تحق الكفالة بموجب شهادة الكفالة هذه؟

فقط أنت، المشتري الأصلي للجهاز والذي اشتراه من DMT Ltd أو من موزعيها المعتمدين، يحق لك الحصول على الكفالة المنصوص عليها في شهادة الكفالة هذه. لكي يحق لك خدمة الكفالة، أنت بحاجة إلى تقديم إثبات بأنك المشتري الأصلي للجهاز من خلال تقديم إيصال الشراء الأصلي للجهاز. لا تعدّ هذه الكفالة كفالة دولية. سوف تكون هذه الكفالة نافذة فقط في الدولة التي يقع فيها مقر مورّع أو جهة DMT Ltd المعتمدة/الذي/التي اشتريت منه/الجهاز.

هي مدة تغطية شهادة الكفالة هذه؟

تغطي الكفالة طلبات التصليح التي يتم تلقيها خلال عام واحد (1) من تاريخ شراء الجهاز الأصلي. لا تتم تغطية طلبات التصليح بعد عام واحد (1) من تاريخ الشراء من قبل شهادة الكفالة هذه. طلبات التصليح التي تخص جهاز تم تصليحه أو استبداله يجب أن تقدّم حتى موعد أقصاه: (أ) عام واحد (1) من تاريخ شراء الجهاز الأصلي أو (ب) تسعون (90) يوماً من التاريخ الذي تم فيه إرجاع الجهاز الذي تم تصليحه أو استبداله لك، الأخير من بينهما. إذا تم إرفاق ملصقاً إلى جهازك ينص على فترة كفالة أطول من تلك المشار إليها أعلاه، فسوف تكون فترة الكفالة المذكورة على الملصق هي السارية، وسوف يتم تصليح أو استبدال الجهاز كجزء من الكفالة حتى انتهاء هذه الفترة.

إذا قمت بشراء الجهاز في إحدى دول الاتحاد الأوروبي، فسيكون لديك سنة إضافية (وفقاً لتوجيه الاتحاد الأوروبي رقم 1999/44) للمطالبة بالنواقص أو الأعطال التي في جهازك، والتي كانت موجودة في وقت الشراء، لكنها لم تكن ظاهرة وقتها، وذلك على النحو الذي تحدده DMT Ltd أو الموزع المعتمد. من أجل جعل هذه الكفالة الإضافية فعالة يجب عليك الاتصال بالموزع المعتمد الذي اشترت منه الجهاز أو مركز الخدمة المحلي وإبلاغهم عن عيب الإنتاج على الفور، وذلك حتى موعد أقصاه 60 يوماً بعد اكتشاف العيب.

كيفية الحصول على الخدمة للكفالة؟

عند طلبك لخدمات العملاء قد يُطلب منك تعبئة استمارة لإرجاع المنتج ويجب أن تحصل على رقم مرجعي. في حالة وجود عيب غير مشمول في الكفالة لأي سبب كان، يمكن لـ DMT Ltd أن تطلب منك دفع تكاليف الشحن والتصليح إذا وافقت على تصليح الجهاز على نفقتك الخاصة.

ما هي الأمور التي لا تغطيها شهادة الكفالة هذه؟

لا تشمل شهادة الكفالة هذه أي ضرر ناتج عن حادث، أو سوء استخدام (بما في ذلك استخدام الجهاز بطريقة مخالفة لما هو موضح في تعليمات الاستخدام المرفقة مع الجهاز)، أو الاستخدام المعيب، أو نقص الحرص المعقول، أو الاستخدام غير المنتظم أو غير المعقول بما في ذلك ولكن دون حصر الاستخدام التجاري أو المهني، أو إضافة قطع غيار لم يتم تزويدها مع الجهاز، أو فقدان القطع، أو استخدام قطع غير مصرح باستخدامها أو تعريض الجهاز لأي تيار كهربائي مخالف للتيار المشار إليه. سوف يتم إلغاء الكفالة في حال تمت معالجة الجهاز من قبل أي شخص غير مصرح له من قبل DMT Ltd ولن تكون DMT Ltd مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن التصليحات التي تم إجراؤها من قبل أي شخص غير مصرح له من قبل DMT Ltd. لا تشمل الكفالة استبدال القطع المستعملة وغير المتينة.

إخلاء مسؤولية الكفالة. إن الكفالة المصرّح عنها الواردة في هذه الوثيقة هي بديلة لجميع الكفالات الأخرى بما في ذلك الكفالات الضمنية الخاصة بالمتاجرة، والمطابقة لغرض معين. تعد هذه الكفالة بمثابة العلاج الوحيد والحصري لأي عيب في الجهاز.

القيود. لن تكون DMT Ltd في أي حال من الأحوال أو أي من الشركات التابعة لها أو موزّعها المعتمدين مسؤولين عن أي أضرار غير مباشرة أو خاصة أو تأديبية أو تحذيرية أو عرضية أو تبعية (بما في ذلك ولكن ليس على سبيل الحصر، الأضرار الناجمة عن فقدان أو تكاليف المعدات البديلة)، وذلك بصرف النظر عن النظرية القانونية التي يستند إليها الإدعاء حتى لو تم إخطارهم بإمكانية حدوث مثل هذه الأضرار. أنه في حال اعتبرت العلاجات المنصوص عليها في هذه الكفالة أنها لا تستوفي الغرض الأساسي منها أو إذا اعتقد أن DMT Ltd أو أي من الشركات التابعة لها أو موزّعها المعتمدين بأنهم مسؤولين عن أضرار استناداً إلى أي نظرية قانونية، فلن تكون DMT Ltd في أي حال من الأحوال أو أي من الشركات التابعة لها أو موزّعها المعتمدين مسؤولين عن أضرار تفوق سعر الجملة لوحدة واحدة من الجهاز وذلك اعتباراً من تاريخ استحقاق سبب الدعوى. أنت تتحمل كافة مخاطر ومسؤوليات الفقدان، أو التلف أو الإصابة لك ولممتلكاتك وللآخرين ولممتلكاتهم الناجمة عن استخدام أو سوء استخدام، أو عدم القدرة على استخدام الجهاز، ما عدا بالقدر الناتج مباشرة عن إهمال DMT Ltd .

تمنحك هذه الكفالة حقوقاً قانونية معينة، وقد يحق لك أيضاً حقوقاً أخرى التي قد تختلف من دولة لأخرى. بعض الدول لا تسمح باستثناء أو تقييد الأضرار العرضية أو التبعية أو الكفالات الضمنية، لذا فقد لا ينطبق عليك إخلاء المسؤولية والقيود أعلاه.

11. حلّ المشاكل

لا تحاولوا أن تفتحوا أو تصلحوا جهازكم. قد تعرّضوا أنفسكم لأجزاء كهربائيّة خطيرة وتسبّب أذى شديداً لأنفسكم. ذلك سيُبطّل أيضاً الضمان.

المشكلة	الفحص
Solio Alfa Cure+ الخاصّ بي لا يبدأ بالعمل.	تأكدوا من أنّ المحوّل موصول بشكل صحيح بالجهاز، وموصول بمخرج كهربائيّ في الحائط، وأنكم قد قمتم بالضغط على زرّ التحكّم.
لا يتمّ بثّ الطاقة عندما يلامس الجهاز جلدي.	افحصوا إذا: كان الجهاز موصولاً بالكهرباء وتمّ تشغيله قمتم بدهن الهلام كان مسطح العلاج يلامس الجلد بشكل جيّد، و أنتم تقومون بتمرير الجهاز على منطقة العلاج.
أحد الأضواء، أو أكثر، يومض بشكل مستمرّ.	تعطلّ الجهاز. افصلوا الجهاز عن الكهرباء وأعيدوا التشغيل.

عند مواجهة مشاكل أو استفسارات، يُرجى الاتصال بخدمة الزبائن.

12. التخلص من الجهاز

ساهموا في حماية البيئة. لا تقوموا برميهِ في النفايات البيئيّة. تأكدوا من تطبيق قوانين بلدكم فيما يتعلق بالتخلص من الأدوات الكهربائيّة



13. الخصائص

H2101/H2102	رقم الموديل
نوع BF	الجزء المستخدم
(IP30 (EN60529	تصنيف الحماية
صمّامات ثنائية بائنة للضوء ذروة طول موجة البث: $630\text{nm} \pm 10\text{nm}$ طول موجة ضوء الـ IR LED: $850\text{nm} \pm 50\text{nm}$	مصدر الضوء
$1\text{MHz} \pm 30\%$; 24W max	تردد الراديو
22 سم * 22 سم * 14 سم	حجم العبوة
200 غم	وزن الجهاز
درجة الحرارة: 40 درجة مئوية تحت الصفر - 70 درجة مئوية الرطوبة النسبية: 10% - 90% الضغط الجوي: 500 - 1060 hPa	النقل والتخزين ما بين الاستعمالات وشروط التخزين
درجة الحرارة: 10 ° - 35 °C الرطوبة النسبية: 30% - 75% الضغط الجوي: 700 - 1060 hPa	شروط التشغيل
النموذج: KSAPVO361200300D5	نماذج المحوّل والتصنيف
المدخل: 100-240V; 50-60Hz; 0.9A المخرج: 12V DC; 3A	

14. العلامات والإشارات

المنتجات التي وُضعت عليها هذا العلامة تلبي متطلبات الأوامر التوجيهية للاتحاد الأوروبي.	
درجة الحماية من الصعقة الكهربائية BF على الجزء المستخدم.	
لا تقوموا برميهِ في النفايات البيئية. تخلّصوا من الجهاز بحسب قوانين بلدكم وساهموا في حماية البيئة. بحسب أوامر WEEE التوجيهية.	
احفظوه جافاً.	
اتّبِعوا إرشادات الاستعمال.	
هذه المعدّات تزوّد طاقة RF غير مؤيّنّة، عمداً.	
غير مقاوم للماء.	IP30

15. وسم

انظر القسم المقابل باللغة الإنجليزية.

16. الرسوم البيانية

انظر القسم المقابل باللغة الإنجليزية.

17. نتائج الاختبارات

انظر القسم المقابل باللغة الإنجليزية.



PB116233A

www.solio.co.il
contact@soliotherapy.com